



Ajustable

Le Alios se déplace verticalement entre 8.75" et 30.5" par vérin électrique

Modulaire

Un des seuls sur le marché à être modifiable en longueur et/ou largeur

Léger

Le Alios est un des plus léger de la catégorie des lits médicalisés au Québec

Facile d'entretien

Boîte de contrôle accessible sur le côté du châssis

Sécuritaire

Les quatres roues sont munies de freins. Certaines fonctions de la télécommande peuvent être bloquées

Robuste

Garantie 5 ans (télécommande 1 an)

Caractéristiques incluses:


- Télécommande rétro-éclairée – 8 fonctions pour ajustement du lit
- Ridelles de 1/2 longueur escamotables qui suivent le relève-buste
- 3 moteurs DC permettent un fonctionnement doux et silencieux
- La surface thérapeutique en grillage offre un support ultime pour les matelas de prévention
- La surface en 3 sections procure une diversité de positions autant confortables que thérapeutiques
- 4 roues avec freins pour plus de sécurité

Modulaire:

- Modification de la largeur du lit de 36 à 39 pouces
- Extension de la longueur du lit à 84 pouces

Options:

- Frein central de sécurité
- Deux options types de ridelles :
 - 3/4 longueur
 - Pleine longueur en bois avec dossier coordonnés
- Batterie d'urgence
- Contrôle infirmier intégré dans le pied de lit
- Veilleuse de nuit aimantée, reliée à la télécommande, qui se place sur le châssis

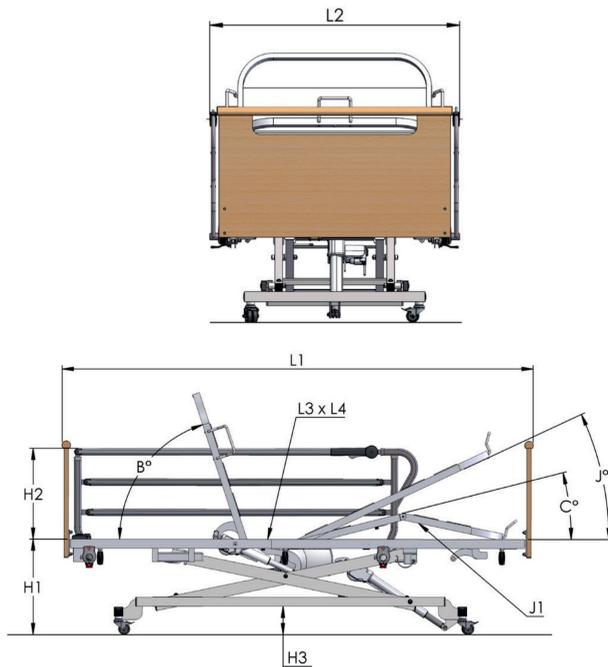

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

ces données dimensionnelles peuvent varier en fonction des tolérances de fabrication

L1	longueur hors tout	82"
L2	largeur hors tout	39"
L3	longueur plan de couchage	78.5"
L4	largeur plan de couchage	35.5"
H1	hauteur max (sol/sommier) hauteur min (sol/sommier)	30.5" 8.75"
H2	hauteur galerie pliante relevée	16"
H3	hauteur sous châssis	5.12"
B	angle max relève buste	70°
C	angle max relève cuisses	23°
J	angle max relève jambes	21°
J1	angle max relève jambes 3P	12° baissé / 24° relevé relève cuisse position max

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type couchage	GRILLAGE
Sommier divisible	OUI
Dispositifs pour potence (nombre)	2
Dispositifs pour tige porte-serum (nombre)	4
Finition époxy	GRIS RAL 7035
Équipement électrique	Classe 2 - Type BF - Protection IP66 - Puissance 6000 N (HV) & 3500 N (RB, RJ ou plicature)
Capacité de levage (patient + matelas + accessoires)	450 lb
Garantie « électrique & mécanique »	5 ans (télécommande = 1 an)
Garantie « dossier & accessoires »	1 an